

Guía Rápida

DATOS GENERALES

Nombre del equipo	:	Electrocardiógrafo
Marca	:	CONTEC
Modelo	:	100G




I-10 BIOMED DATA

Ubicación del equipo	:	Estante #4
Ubicación de accesorios	:	Armario A

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Función	:	Captura, amplifica, visualiza, analiza y registra señales eléctricas del corazón de hasta 12 derivaciones, en 3 canales simultáneos.
Principio de operación	:	Adquiere señales eléctricas cardíacas mediante electrodos; las señales son amplificadas y convertidas de analógicas a digitales.

PARTES DEL EQUIPO

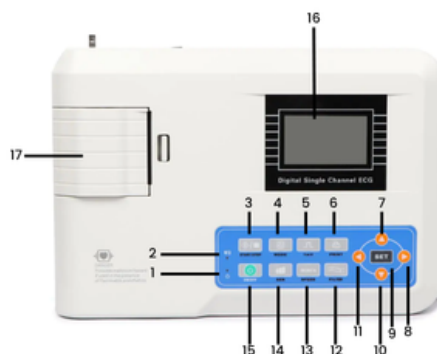

Vista frontal - Monitor ECG - CONTEC - 100G

1. Indicador de arranque
2. Indicador de estado de energíaa
3. Menúo
4. Modo
5. Calibrar
6. Imprimir
7. Direcci3n arriba
8. Direcci3n derecha
9. Menúo del sistema y confirmaci3n
10. Direcci3n abajo
11. Direcci3n izquierda
12. Filtro
13. Velocidad
14. Ajuste de sensibilidad
15. Encender/Apagar
16. Pantalla
17. Impresora

ACCESORIOS

Cable de alimentaci3n de grado m3dico	
Cable de tierra	
Cable de paciente	
Electrodos de pinza	
Papel de impresi3n	
Electrodos de succi3n	
Manual	

*Imágenes con fines ilustrativos, procure utilizar los accesorios correspondientemente etiquetados para el equipo.

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

- ☐ Equipo en buen estado físico
- ☐ Cable de paciente en buen estado
- ☐ Electrodo s funcionales y limpios
- ☐ Gel conductor disponible
- ☐ Papel térmico instalado
- ☐ Alimentación eléctrica segura o batería cargada
- ☐ Derivaciones correctamente identificadas y conectadas

MONTAJE

- ☐ Verificar estado físico del equipo.
- ☐ Conectar a red eléctrica.
- ☐ Encender equipo y confirmar autochequeo correcto.
- ☐ Confirmar en pantalla estado de derivaciones “NORM”.
- ☐ Colocar electrodos de extremidades (RA, LA, RL, LL).
- ☐ Verificar que los electrodos no estén en contacto entre sí.
- ☐ Colocar electrodos precordiales (V1–V6).

DESMONTAJE

- ☐ Retiro de electrodos.
- ☐ Desconexión de accesorios.
- ☐ Limpieza de material reutilizable.
- ☐ Orden de cables, al enrollarlos, procura seguir la forma de la fibra para evitar quebrarla
- ☐ Apagar el equipo.
- ☐ Dejar todo en su lugar.